

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 режима работы RL 230
- 10 уровней давления в режиме DIY
- Частота пульсации – 1200–1600 в мин.
- Уровень давления жидкости – 140–900 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 300 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (1500 mAh)
- Потребляемая мощность – 8 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Зарядка через кабель Type-C
- Время полной зарядки – 4 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 7 дней
- Размеры изделия – 88x73,5x227 мм.
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Стикерпак
- Инструкция по эксплуатации

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_


М.П. \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

# СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

## СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

### Электрические звуковые зубные щетки

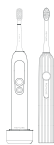

Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

### Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

### Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

## ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49  
[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)



# REVYLINE

## PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР  
для ПОЛОСТИ РТА

# БЫСТРЫЙ СТАРТ

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C.
- Перед первым использованием ирригатора аккумулятор необходимо зарядить полностью.
- Во время зарядки аккумулятора происходит попеременное мигание индикаторов режимов работы. Когда зарядка завершена, одновременно горят все индикаторы.
- Чтобы проверить уровень заряда, в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку М. Чем выше заряд, тем больше горит индикаторов.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

## НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



В базовой комплектации RL 230 2 стандартные сменные насадки.

Насадки (тип В) совместимы с моделями RL 200/210/200XL/220.

## УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ



Чтобы установить насадку, вставьте ее в разъем и слегка надавите (до щелчка). Чтобы извлечь насадку, удерживайте нажатой кнопку блокировки.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

## НАЧАЛО РАБОТЫ



В приборе предусмотрена функция блокировки случайных нажатий, то есть включить ирригатор с помощью кратковременного нажатия кнопки вкл/выкл невозможно.



Чтобы включить прибор, в течение нескольких секунд удерживайте кнопку вкл/выкл.



Выключается прибор с помощью короткого нажатия кнопки вкл/выкл.



Нужный режим работы устанавливается последовательным нажатием кнопки выбора режимов.

Портативный ирригатор RL 230 позволяет использовать 4 режима работы:

Normal Soft Pulse DIY



У режима DIY 10 уровней давления. Чтобы выбрать нужный, нажмите и удерживайте кнопку М (постепенно давление будет возрастать). Отпустите кнопку, когда настройки вас удовлетворят.



## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА



Наполнение резервуара водой происходит через боковое отверстие.

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА

Чтобы отсоединить резервуар от корпуса, потяните его верхнюю и нижнюю части в разные стороны. Чтобы установить резервуар, присоедините его к корпусу до упора.

## ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

У ирригатора RL 230 полностью герметичная конструкция (одно сопло для забора воздуха, другое – для подачи воды).

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:  
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.  
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  
Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушенок М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42  
Manufacturer/Производитель: FLY CAT ELECTRICAL CO., LTD – No. 28 Bldg., Longwangmiao Industrial Park, Balishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China | Сделано в Китае