

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RL 100 NEO

- 15 уровней давления, включая детский
- Встроенный таймер – 3 минуты
- Частота пульсации – 1200–1700 в мин.
- Уровень давления жидкости – 210–920 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX4
- Емкость резервуара – 600 мл
- Питание – от сети переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность – 18 Вт
- Уровень шума – ≤ 75 дБ
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 4 стандартные сменные насадки
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

STATIONARY ORAL IRRIGATOR


СТАЦИОНАРНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

БЫСТРЫЙ СТАРТ

НАЧАЛО РАБОТЫ



Для подключения ирригатора к сети вставьте штепсельную вилку в розетку.

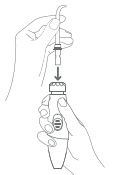

Установите насадку в разъем, расположенный наверху рукоятки и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для извлечения насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки.


Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.



Снимите крышку и залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40°C, или раствор, рекомендованный врачом-стоматологом.



Для начала ирригации переведите переключатель на ручке прибора в положение ON, по окончании – в положение OFF до щелчка.

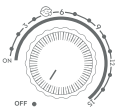

Для выбора мощности напора водной струи используйте регулятор давления: по часовой стрелке – для увеличения, против – для уменьшения.

15



Стационарный ирригатор RL 100 NEO позволяет использовать 15 уровней давления жидкости, включая детский.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

РЕЖИМ ПАУЗЫ

Если во время работы прибора переключатель на ручке перевести в положение OFF, подача воды прекратится. В положении OFF запрещено оставлять переключатель более чем на 10 секунд при работающем ирригаторе, так как это может привести к его поломке.

ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР



Прибор оснащен автоматическим таймером. Отключение происходит через 3 минуты.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



В базовой комплектации RL 100 NEO 4 стандартные сменные насадки.

ОСОБЕННОСТИ



Ирригатор оснащен крышкой-пеналом, в которой можно хранить насадки.



На дне ирригатора – ножки-присоски для надежной фиксации прибора на горизонтальной поверхности.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушников М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42
Manufacturer/Производитель: FLY CAT ELECTRICAL CO., LTD – No. 28 Bldg., Longwangmiao Industrial Park, Baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China | Сделано в Китае